




Les séries Dune offrent tout ce dont il est nécessaire afin d'accomplir un pesage rapide et simple. Chaque Dune est équipée d'un adaptateur AC, d'un auto-calibrage via le clavier, d'un indicateur de batterie faible, et d'un indicateur de surcharge. Grâce à son fonctionnement complémentaire sur piles, son clavier étanche, et son boîtier en plastique ultra robuste, la Dune est capable de fournir des lectures précises sur le terrain, dans les classes, sur les lieux de travail et en laboratoire. C'est un produit véritablement polyvalent et portable.

Design épuré pour le pesage de base en laboratoire, en classe ou sur le terrain



Caractéristiques

- Large écran très contrasté, facilement lisible à distance
- Touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- La conception légère facilite le transport et la portabilité
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Grand plateau amovible pour un nettoyage rapide
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Fonction recherche du zéro assure que l'affichage revient à zéro
- Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)

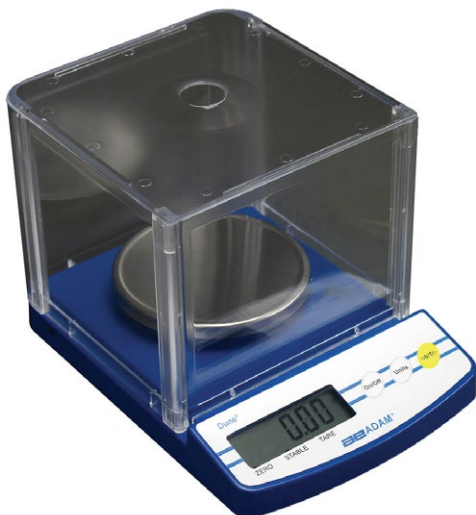

DCT 302

Application

- Pesage

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	DCT 302	DCT 201	DCT 601	DCT 2001	DCT 2000	DCT 5000
Capacité	300g	200g	600g	2000g	2000g	5000g
Précision	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	2g
Reproductibilité (S.D)	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	1g	2g
Linéarité (+/-)	0.02g	0.2g	0.2g	0.2g	2g	4g
Taille du plateau	100mm ø	145x145mm				
Unités de pesage	g, oz		g, lb, oz			
Portée de la tare	Pleine portée					
Temps de stabilisation (sec)	2					
Calibrage	Calibrage externe					
Affichage	LCD avec des chiffres de 15mm de haut					
Alimentation	Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA / 6 piles AA					
Température d'utilisation	0° à 40°C					
Carter	ABS					
Chambre de protection	Carré 145x148x120mm	Non disponible				
Dim. totale	147x208x150mm (lpxph)					
Poids net	0.5kg					

Accessoires

Numéro d'article	Description
700660290	Certificat de Calibrage
700100012.....	Masse de calibrage F1 200g
700100010	Masse de calibrage F1 2kg
700100030	Masse de calibrage M1 2kg
700100060	Masse de calibrage M1 500g
700100072.....	Masse de calibrage M1 200g

Fourni par