



Vitesse, Performance, Valeur - La Balance Ideale


La Table Anti-Vibration aide à fournir une surface stable et réduit les vibrations, les chocs et les influences externes agissant sur les systèmes placés sur la surface de travail en marbre. Conçue pour le laboratoire ou les salles de métrologie la table anti-vibration dispose d'une conception ergonomique et est construite pour durer.

- Grande surface de travail de 400 x 450 mm
- Structure légère en aluminium facile à monter
- Pieds réglables de mise à niveau
- Plaque de marbre résistante aux éraflures
- Finition polie

La table comprend deux parties séparées;

- Une surface de travail interne composée d'une large plaque de marbre montée sur des supports en caoutchouc anti-chocs réglables
- Une table de service externe avec une structure en aluminium et pieds réglables de mise à niveau

Dimensions totales (l x p x h)	800 x 600 x 782mm
Dimensions de la Surface de travail	400 x 450mm
Poids de la surface de travail	49kg
Poids total	77kg

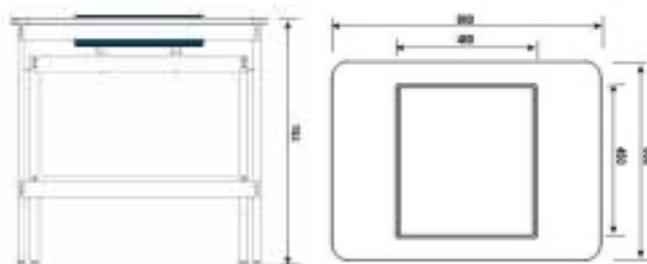

www.adamequipment.com

Adam Equipment - Agences dans le monde