

SÉRIE 7.90**EN 14470-1 EN 1363-1****ARMOIRES DE SÉCURITÉ - EN 14470-1
105 minutes pour produits inflammables**

Pictogramme normalisé




Étagères de rétention



Orifice de ventilation avec thermofusible



Ferme-porte avec thermofusible

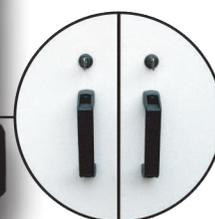

Fermeture à clef



Bac de rétention amovible



*795E + C79235

CONFORMITÉ

- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, à la directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).

AVANTAGES

- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO 834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen indépendant.

SÉCURITÉ PASSIVE

- Construction double paroi :
 - Parois extérieures en acier 12/10^{ème}, recouvertes de peinture époxy blanche RAL 9010.
 - Parois intérieures en mélaminé blanc RAL 9010.
- Panneaux d'isolation thermique entre les parois limitant les ponts thermiques.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE

- Orifices de ventilation avec sortie de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant d'isoler le contenu de l'armoire en cas d'incendie.
- Joints de porte thermodilatants.
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermorégulée à 50°C.

OPTIONS

- Possibilité de portes de couleur sur les modèles 794 et 795:
 - bâti et étagère blancs RAL 9010; porte(s) jaune(s) RAL 1023,


Système de réfrigération

Afin d'augmenter la sécurité de votre armoire et de contrôler la température à l'intérieur de celle-ci, nous vous proposons un système de réfrigération. Consultez-nous plus d'informations.



SÉRIE 7.90


EN 14470-1 EN 1363-1

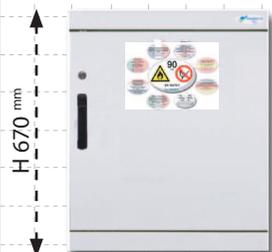


▲ 791E




▲ 792E

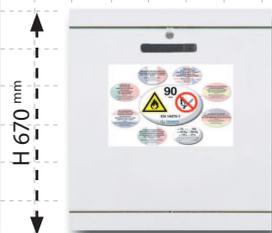

▲ 791T

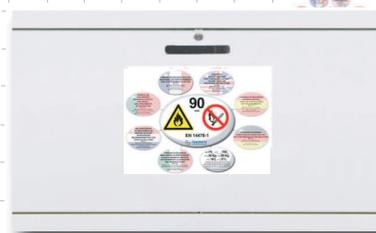

▲ 792T

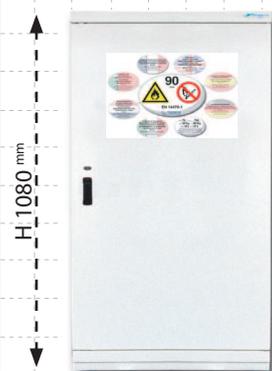

▲ 798E



▲ 793E



▲ 794E



▲ 795-900E



▲ 795E

L 635 mm

L 900 mm

L 1135 mm

P615 mm

P615 mm

P615 mm

P615 mm

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Rétention et Réceptifs

Équipements anti-feu Armoires à documents

Douches et premiers secours

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 02/2015

N.B. : Conformément à la norme EN14470-1 et pour éviter un confinement éventuel des vapeurs, une ventilation mécanique est requise pour assurer un renouvellement d'air. Il appartient, dans tous les cas, à chaque utilisateur final de s'adresser au responsable sécurité de son entreprise ou auprès de son fournisseur en produits chimiques, avant de stocker ses produits dans des armoires multirisques. Voir notre documentation concernant nos caissons de filtration et de ventilation.

Armoires
inflammables

Armoires
corrosifs

Armoires toxiques
et multirisques

Gamme
phytosanitaires

Hottes et armoires à
filtration - Ventilation

Rétention et
Réceptifs

Équipements anti-feu
Armoires à documents

Douches et
premiers secours

SÉRIE 7.90

EN 14470-1 EN 1363-1



798E[▲]



793E[▲]



794[▲]
+ 5x T79148

▲ 795
+ 6x T79235

792T[▲]



© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 02/2015

N.B. : Conformément à la norme EN14470-1 et pour éviter un confinement éventuel des vapeurs, une ventilation mécanique est requise pour assurer un renouvellement d'air. Il appartient, dans tous les cas, à chaque utilisateur final de s'adresser au responsable sécurité de son entreprise ou auprès de son fournisseur en produits chimiques, avant de stocker ses produits dans des armoires multirisques. Voir notre documentation concernant nos caissons de filtration et de ventilation.

SÉRIE 7.90**EN 14470-1 EN 1363-1**

HOMOLOGUÉE
90
min
EN 14470-1

TESTÉE
105
min
AU FEU SELON
EN 14470-1

794EJ[▲]795EJ[▲]**ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES**

Référence pour porte		Description	Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Fournie avec		Poids (kg)
blanche	jaune						Etagère de rétention	Bac de rétention	
791E	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	670 x 635 x 615	30	1	1	127
791T	-	Armoire équipée	sous paillasse	1	670 x 635 x 615	30	-	1	155
792E	-	Armoire équipée	sous paillasse	2	670 x 1135 x 615	60	1	1	213
792T	-	Armoire équipée	sous paillasse	2	670 x 1135 x 615	60	-	1	240
798E	-	Armoire équipée	comptoir	1	1080 x 635 x 615	65	2	1	182
793E	-	Armoire équipée	comptoir	2	1080 x 1135 x 615	115	2	1	297
794E	794EJ	Armoire équipée	haute	1	1880 x 635 x 615	130	3	1	287
795E	795EJ	Armoire équipée	haute	2	1880 x 1135 x 615	250	3	1	453
795-900E	-	Armoire équipée	haute	2	1880 x 900 x 615	200	3	1	438

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Référence	Description	Type	Nombre de porte(s)	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Poids (kg)
791	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	1	670 x 635 x 615	460 x 490 x 380	122
792	Armoire livrée nue, à équiper	sous paillasse	2	670 x 1135 x 615	460 x 1000 x 380	203
798	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	1	1080 x 635 x 615	820 x 490 x 410	171
793	Armoire livrée nue, à équiper	comptoir	2	1080 x 1135 x 615	820 x 1000 x 410	277
794	Armoire livrée nue, à équiper	haute	1	1880 x 635 x 615	1620 x 490 x 410	277
795	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1880 x 1135 x 615	1620 x 1000 x 410	435
795-900	Armoire livrée nue, à équiper	haute	2	1880 x 900 x 615	1620 x 765 x 410	420
E79148	Étagère de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 615 mm			30 x 490 x 410	-	3
E79235	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 615 mm			30 x 1000 x 410	-	6
E79235-900	Étagère de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 615 mm			30 x 765 x 410	-	6
B79148	Bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 615 mm			100 x 490 x 410	-	5
B79235	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 615 mm			100 x 1000 x 410	-	10
B79235-900	Bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 615 mm			100 x 765 x 410	-	10
C79148	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 1 porte - L : 635 - P : 615 mm			90 x 460 x 390	-	4
C79235	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 1135 - P : 615 mm			90 x 990 x 400	-	8
C79235-900	Caillebotis pour bac de rétention pour armoire 2 portes - L : 900 - P : 615 mm			90 x 755 x 400	-	8
C791T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir			80 x 430 x 390	-	8
C792T	Caillebotis pour bac pour armoire 1 porte tiroir			80 x 940 x 390	-	8
T79148	Tiroir/bac coulissant pour armoire 1 porte - L : 635 mm - P : 615 mm			80 x 420 x 380	-	6
T79235	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 1135 mm - P : 615 mm			80 x 930 x 380	-	12
T79235-900	Tiroir/bac coulissant pour armoire 2 portes - L : 900 mm - P : 615 mm			80 x 695 x 380	-	12
SE79148	Surétagère rétention PVC pour E79148 (pour modèle E79235, 2 pièces par niveau)			30 x 488 x 377	-	3
SB79148	Bac de rétention en PVC pour armoire à 1 porte en L : 615 mm Pour les modèles à 2 portes en L : 1135, prévoir 2 pièces par niveau			100 x 471 x 409	-	5
TP79148	Toit en pente pour armoire 1 porte			235 x 640 x 620	-	10
TP79235	Toit en pente pour armoire 2 portes			235 x 1140 x 620	-	20

© TRIONYX se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Édition 02/2015

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

Armoires toxiques et multirisques

Gamme phytosanitaires

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Rétention et Réceptifs

Équipements anti-feu
Armoires à documents

Douches et premiers secours