

Elmasonic Xtra

Appareils de nettoyage à ultrasons

Information et Prix de Produit



Table des matières

Elmasonic Xtra	3
Numéros de commande et prix courant	3
Caractéristiques et fonctions du produit	4
Données techniques - Mécanique	5
Données techniques - Électronique	6
Définition des mesures	7

Elmasonic Xtra

Appareils de nettoyage à ultrasons



Numéros de commande et prix courant

Elmasonic Xtra	40	60	120	180	300
N° de commande 220 - 240 V~	1127779	1130253	1127783	1127785	1127787
N° de commande 115 - 120 V~	1127778	1130252	1127782	1127784	1127786
Prix courant	1.200,00	1.400,00 €	1.950,00 €	2.400,00 €	2.950,00 €

Les prix indiqués sont des prix nets départ usine, hors frais de transport, assurance, droits de douane et taxes.

Contenu de la livraison

- Appareil à ultrasons
- Couvercle en acier inoxydable
- Câble secteur (2m de longueur)
- Manuel d'utilisation

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Elmasonic Xtra

Caractéristiques et fonctions du produit

- 37 kHz Fréquence des ultrasons (plage de réglage -2,5 / +5,5 kHz)
- 2 modes d'ultrasons pour une répartition du champ sonore dans le bain à ultrasons en fonction des besoins
 - mode dynamic, réglé automatiquement : Permet un nettoyage plus intensif avec une puissance de nettoyage plus élevée. Balayage et pulsation en alternance pour un nettoyage homogène et puissant.
 - mode eco, activable : sert à un nettoyage en douceur avec un fonctionnement plus silencieux. Permet d'économiser de l'énergie et d'augmenter la durée de vie de la baignoire.
- Sélecteur électronique sur clavier à membrane effaçable et affichage LED de tous les états de fonctionnement
- Présélection du temps de nettoyage : durée de nettoyage réglable entre 1 minute et 30 minutes ou mode continu réglable (mode continu à ultrasons max. 6 heures)
- Signal sonore et visuel à la fin du nettoyage
- Régulation de la température par paliers de 5 °C réglable de 30 à 80 °C pour les appareils avec chauffage (tolérance de température -5 / +8 °C)
- Arrêt de sécurité avec fonction Wake Up
 - après une interruption d'utilisation de 8 heures
 - en cas d'interruption brève de l'alimentation en tension
- Arrêt automatique du fonctionnement aux ultrasons lorsque la température du bain est > 90 °C
- Boîtier et bac de nettoyage en acier inoxydable protégés contre les projections d'eau
- Écoulement de liquide en acier inoxydable sur le côté de l'appareil
- Détection de la marche à sec
- Bac de nettoyage en acier inoxydable, traitement de surface pour une durée de vie plus longue
- Fond de cuve incliné pour faciliter l'évacuation du liquide de nettoyage
- 2 ans de garantie à partir de la première mise en service sur l'appareil à ultrasons, mais au maximum 3 ans à partir de la date de production
- 3 ans de garantie à partir de la première mise en service sur la cuve soudée, mais au maximum 4 ans à partir de la date de production



Elmasonic Xtra

Données techniques - Mécanique

Taille de l'appareil	Unité	40	60	120	180	300
Volume total V	L	5,0	6,3	14,2	19,7	30,0
Volume de travail recommandé V _a	L	4,0	5,1	12,1	16,7	25,4
Dimensions extérieures L / P / H	mm	435 x 215 x 330	500 x 215 x 330	500 x 315 x 380	530 x 380 x 380	700 x 380 x 380
Dimensions intérieures L ₁ / P ₁ / H ₁ (cuve)	mm	235 x 135 x 150	300 x 135 x 150	300 x 235 x 190	330 x 295 x 190	500 x 295 x 190
Poids à la livraison	Kg	6,8	7,9	11,3	13,2	17,8
Filet de raccordement écoulement	Pouces	1/2				
Panier dimensions intérieures L ₃ / P ₃ / H ₃ (accessoires d'origine)	mm	195 x 105 x 95	255 x 105 x 95	245 x 195 x 135	275 x 255 x 135	445 x 255 x 135
Charge max. du panier (accessoires d'origine)	Kg	3,0	5,0	7,0	8,0	10,0

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.



Elmasonic Xtra

Données techniques - Électronique

Taille de l'appareil	Unité	40	60	120	180	300
Tension de réseau ± 10 %	V~	220 - 240 / 115 - 120				
Fréquence de réseau	Hz	50 / 60				
Fréquence ultrasonique -2,5 / +5,5	kHz	37				
Puissance absorbée totale	W	540	560	1020	1260	1530
Puissance ultras. effective ± 10 %	W	140	160	220	260	330
Puissance ultras. de crête max.	W	560	640	880	1040	1320
Puissance de chauffage	W	400	400	800	1000	1200
Température	°C	30 - 80				
Type de protection	IP	20				
Niveau de pression sonore (LpAU)*	dB	< 80				


* Niveau de pression acoustique mesuré avec le panier et le couvercle à une distance de 1 m.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Elmasonic Xtra



Définition des mesures

Dimensions extérieures de l'appareil

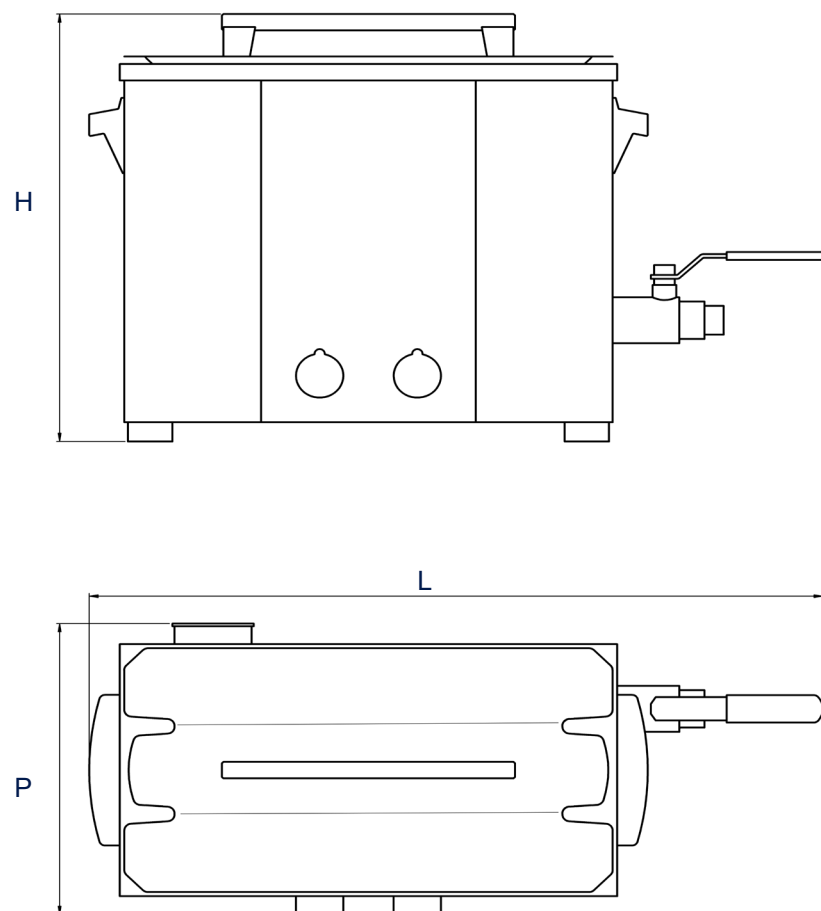

Dimensions intérieures de cuve

V_a : volume de travail recommandé
(Le volume de travail réel dépend de la charge.)

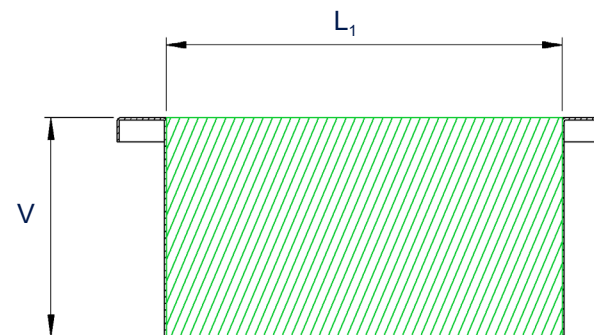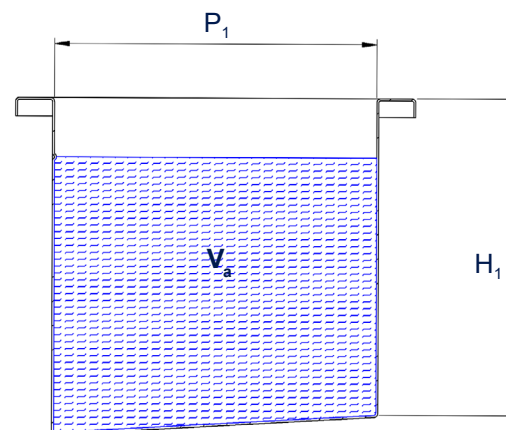



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Elmasonic Xtra

Définition des mesures

Dimensions intérieures du panier

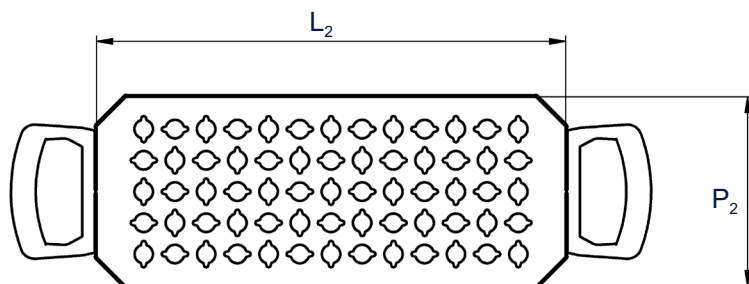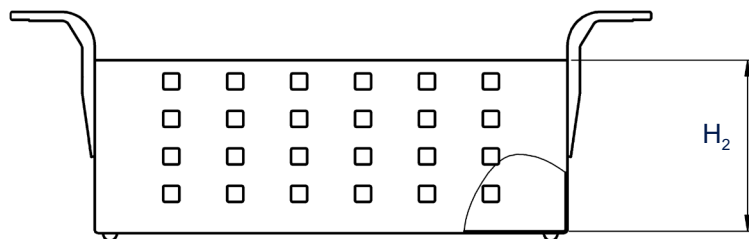

Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.