



Elmadry TD			
	TD 30	TD 120	TD 300
220-240 V AC (50/60 Hz) Réf. Art.	108 2175	107 8542	107 8575
100-120 V AC (50/60 Hz) Réf.Art.	108 2662	108 2664	108 2666
Description Elmadry TD : Après le nettoyage dans le bain d'ultrasons, l'article nettoyé est d'abord rincé à l'eau courante dans le panier puis plongé dans un bain d'eau entièrement déminéralisée ou d'eau distillée. (Nécessaire pour éviter les taches au séchage) L'article nettoyé peut également être rincé à l'eau déminéralisée au moyen d'une pissette. Le panier est ensuite déposé dans le séchoir à air chaud ; une fois le couvercle placé, l'air chaud est activé. Le couvercle dispose d'une fente d'aération permettant de générer une turbulence d'air maximale. L'air humide est conduit vers l'extérieur. Le couvercle réduit également la consommation d'énergie. Le filtre à poussière échangeable empêche tout nouvel encrassement par les poussières contenues dans l'air ambiant. Pour refroidir rapidement l'article séché, il est possible de basculer en mode air froid.			

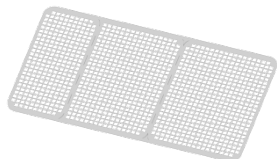
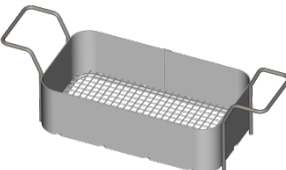
Caractéristiques produit Elmadry TD

- Adapté à différentes tailles de panier.
- Cette compatibilité permet d'utiliser les paniers de l'appareil à ultrasons comme paniers de séchage.
- Utilisation simple et rapide via un interrupteur à bascule à trois positions : arrêt, air chaud, air froid.
- Température de séchage max. 70 °C.
- Refroidissement à température ambiante.
- Couvercle assurant économie d'énergie et turbulence de flux efficace autour de l'article à sécher.
- Coupure de sécurité automatique en cas de température excessive
- Tapis en silicone (perforé), accessoire pouvant être disposé sur le fond afin de pouvoir placer l'article à sécher directement sur le fond (sans rayure).
- Le filtre à poussière (échangeable) empêche que des poussières contenues dans l'air ambiant encrassent à nouveau l'article à sécher.
- Branchement par prise pour appareil froid : grande mobilité car le câble secteur peut être débranché au niveau de l'appareil.
- Boîtier en acier inoxydable protégé contre les gouttes d'eau

	TD 30	TD 120	TD 300
•		•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

Caractéristiques techniques :			
Elmadry TD	TD 30	TD 120	TD 300
Données mécaniques			
Dimensions intérieures de cuve L/P/H (approx. en mm)	240/137/100	300/240/200	505/300/200
Dimensions extérieures de l'appareil L/P/H (mm)	300/186/219	362/285/322	568/347/322
Poids (kg)	3,6	6,1	10,2
Chargement maximal (kg)	1	7	12
Largeur de maille de la toile métallique (mm)		2	
Diamètre du fil de la toile métallique (mm)		0,63	
Données électriques			
Tension de réseau (VAC) (50/60 Hz)	100-120 ou 220-240		
Puissance de chauffage à 115 et 230 V (W)	480	550	1100
Puissance à 115 et 230 V (W)	500	570	1140
Température max. (°C)	70		
Temps de préchauffage (min)	~15		
Débit d'air max. (m³/h)	160	160	320
Matériau			
Cuve	Acier chromé		
Boîtier	Acier chromé		
Accessoires			
Tailles de panier adaptées :			
Elmasonic S/P Line	1x 30	2 x 30/40 1 x 100/120	3x 60 1x 60 + 1x 100/120 2x 100/120 1 x 150/300
Elmasonic xtra TT	-	2 x 30 1 x 60	1 x 30/60/120/200
xtra 30/50/70/150	-	1 x 30 1 x 50	3 x 30 1 x 70/150

Accessoires:

Elmadry TD		TD 30			TD 120		TD 300	
	Tapis en silicone Réf. Art.	30/40 108 2379			60/120/150/300 108 2378			
	Panier en inox Taille (L/P/H en mm) :	30 (198/106/51)	40 (190/105/76)	60 (255/115/76)	100 (255/200/75)	120 (250/190/115)	150 (455/250/49)	300 (455/250/114)
	Largeur de maille (mm) :	7x1	7x1	9x1	9x1	9x1	9x1	7x1
	Réf. Art.	100 4176	100 4232	100 4243	100 4178	100 4277	103 1243	100 4271
		Sous réserve de modifications techniques et optiques 04/2017						