

Captair Pyramid

Boîte à gants transportable

Intervenez, prélevez, analysez tout en étant protégé



Applications :

- Ouvertures de colis suspects
- Prélèvements d'échantillons sur site
- Travaux sous atmosphère inerte
- Révélation d'empreintes digitales
- Protection des personnes contre les projections lors de biopsies
- Réalisation des manipulations à l'abri de la poussière et de l'humidité

Enceinte d'isolation transportable

Captair Pyramid est destinée à la protection des personnes, l'investigation et le transport d'éléments biologiques.

Une installation et une utilisation simple


Enceinte multi-fonctions en PVC transparent de haute qualité. Assemblée en quelques secondes, elle peut être utilisée n'importe où. La forme inclinée de la structure permet une position de travail ergonomique. Transportable et légère, cette enceinte de protection peut convenir à beaucoup d'exigences en laboratoire ou sur le terrain.

Étanchéité optimale

Chaque enceinte fait l'objet d'un test avant la mise sur le marché.

Un gonflage à air comprimé est effectué à une pression de 2,5 mm Hg.

Un certificat de conformité est fourni avec chaque enceinte qui est identifiée par un numéro de série.

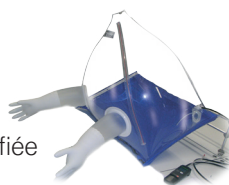


Transport facile

Emballage souple en PVC, pour un transport facile.



Spécifications

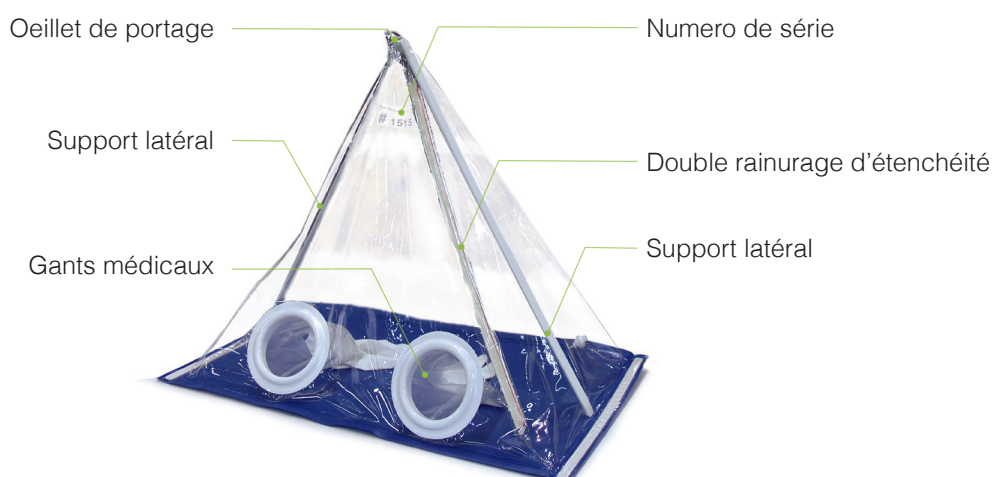

Dimensions

Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
860	560	725

Caractéristiques

Enceinte et base	PVC souple assemblés par soudure haute fréquence
Fermeture	Double rainurage d'étanchéité (600mm)
2 ouvertures bras	PVC rigide 115 mm Ø
Oeillet de portage	16 mm Ø
Température d'utilisation	-25° à +45°
Poids net	1,55 kg

Equipements

Gants médicaux	En butyl et manchettes en PVC
Numéro de série	Numéro unique pour plus de traçabilité
Valve	Permet le remplissage de l'enceinte avec un gaz inerte (Azote)

