

#N°1 français
du service
pour les
laboratoires



SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES
pour laboratoires
& industries

NOTRE ÉQUIPE EST COMPOSÉE D'EXPERTS, DE PASSIONNÉS,
DE TECHNICIENS, EN CONSTANTE FORMATION.

- PLUS DE 40 COLLABORATEURS
- PLUS DE 25 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE



Retrouvez
tous nos équipements
et services sur

WWW.LABOANDCO.COM

DES CONSEILS POUR CHAQUE VENTE & SERVICE



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques. **Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.**

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.



DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des milliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec **les plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

DES INTERVENTIONS SÉCURISÉES ET CERTIFIÉES

Une réactivité essentielle

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production.

Des techniciens pleinement habilités

Nos équipes disposent des habilitations requises : manipulation des fluides frigorigènes, habilitations électriques, risques chimiques, etc... Pour des interventions conformes et sécurisées.

Une offre complète et flexible

Notre large éventail de services nous permet de répondre à toutes vos problématiques, qu'il s'agisse d'un besoin ponctuel ou récurrent.

Vos essais externalisés sont effectués dans notre propre laboratoire par nos équipes spécialisées


- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN (ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET FROID)
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS



CERTIFICATIONS

Labo and Co est **certifié pour garantir à ses clients des prestations fiables, traçables et conformes aux normes** les plus exigeantes du secteur du laboratoire et de l'industrie.

- **Certification ISO 9001** – Qualité et fiabilité de nos services
- **Certification CEFRI n°1616E** – Interventions en zones réglementées

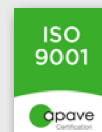

Découvrez la Location Longue Durée

Une solution flexible et sécurisante pour équiper votre laboratoire en toute sérénité : Mise en service, maintenance, SAV, extensions de garanties, la solution clé en main !



@ contact@laboandco.com

www.laboandco.com

+33 1 45 98 74 80

Feuille de données techniques

VALEGRO 1501H refroidisseur à circulation


avec des puissances de refroidissement de 0,8 à 1,8 kW

Les refroidisseurs à circulation VALEGRO avec fonction de chauffage supplémentaire ont la plage de température de travail étendue de -20 à 85 °C. La pompe peut être réglée de manière conviviale en différents étages de la pompe en pourcentage.


VALEGRO 1501H Que ce soit en laboratoire, dans la recherche ou dans la production, les refroidisseurs à circulation VALEGRO offrent une puissance de refroidissement constante de 1.5 kW à 20 °C et garantissent ainsi des processus stables 24 heures sur 24. Ces appareils modernes offrent un contrôle précis de la température pour une grande variété d'utilisations et s'intègrent parfaitement dans n'importe quel environnement de travail grâce à leur conception compacte. Le circuit de refroidissement fonctionne avec un gaz réfrigérant naturel. Lors du développement des refroidisseurs à circulation VALEGRO, l'accent a été mis sur une convivialité maximale. De nombreuses fonctionnalités utiles, telles qu'une fonction minuterie, une grille de ventilateur amovible sans outil ou un indicateur de niveau éclairé et simple, facilitent le travail quotidien. L'écran tactile OLED incliné est facile à lire et ergonomique. Le menu intuitif permet d'accéder rapidement à toutes les fonctions. Les avertissements et les messages système s'affichent dans un langage clair et compréhensible, garantissant ainsi une sécurité maximale lors de l'utilisation de l'appareil. Outre les interfaces RS232 et USB-C, les refroidisseurs à circulation VALEGRO sont également disponibles avec Ethernet (en option). Toutes les interfaces sont situées directement sous l'écran et sont faciles à utiliser depuis l'avant.




Temps de refroidissement Medium: Etanol

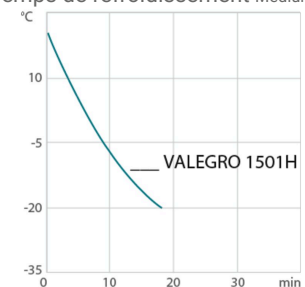

Temps de chauffe Medium: Thermal G

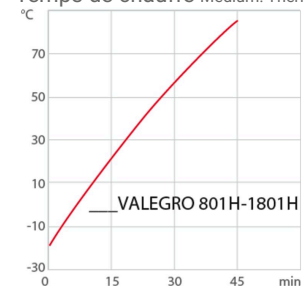

Pump capacity

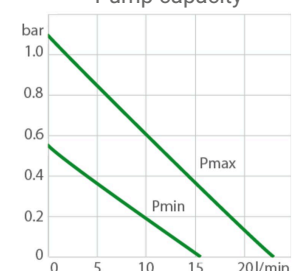

Caractéristiques du produit

- ✓ Utilisation conviviale grâce à de vastes textes d'aide
- ✓ Guidage intuitif par menu en texte intégral allemand/anglais
- ✓ Enregistrement des données
- ✓ Fonction de démarrage automatique
- ✓ Fonction simple de minuterie
- ✓ Grille de ventilation amovible sans outils
- ✓ Roulettes pour une bonne maniabilité
- ✓ Constance de température précise de ± 0.2 °C

Options disponibles

Interfaces

Activation de l'interface Ethernet

L'interface Ethernet intégrée au refroidisseur à circulation VALEGRO est activée en usine et permet d'utiliser les fonctions de communication et de commande basées sur le réseau.



Performances

230V/50Hz (Multiple Plugs (EU / US))

Puissance de chauffe kW	2
-------------------------	---

Viscosité max cSt	50
-------------------	----

Débit de la pompe refoulante l/min	15 ... 23
------------------------------------	-----------

Puissance de la pompe pression bar	0.5 ... 1.1
------------------------------------	-------------

Consommation d'énergie A	11
--------------------------	----

Tolérance de tension %	230V ±10
------------------------	------------

Numéro de commande, y compris la version de tension (230V/50Hz)	9612151.30005683
---	------------------

Puissance frigorifique 1 (Etanol)

°C	20	0	-10	-20
kW ¹	1.5	1	0.7	0.4

Note about natural refrigerants:

Temperature control units using natural refrigerants are often subject to regulatory requirements regarding the installation site, operation, transport or disposal of the units. If you have any questions, we will be happy to advise you.

Réfrigérant niveau 1

Fluide frigorigène	R290
--------------------	------

Poids de remplissage g	80
------------------------	----

Potentiel de Réchauffement Global pour R290	3
---	---

Équivalent dioxyde de carbone t	0.00024
---------------------------------	---------

¹ Données de performances mesurées selon DIN 12876. Puissances de froid jusqu'à 20 °C mesurées avec de l'éthanol, au-dessus de 20 °C mesurées avec de l'huile thermique, sauf indication contraire. Les données de performances sont valables pour une température d'environnement de 20 °C. Les valeurs de performances peuvent différer de celles d'autres liquides de bain.

Données techniques

Versions de tension disponibles

Référence 9612151

Versions de tension disponibles:

9612151.30005682	100-115V 50/60Hz (Raccord Nema N5-15) (R290)
9612151.30005683	200-230V 50/60Hz (Multiple Plugs (EU / US)) (R290)
9612151.30005684	200-230V 50/60Hz (Raccord UK Typ BS1363A) (R290)
9612151.30005685	200-230V 50/60Hz (Raccord CH Type SEV 1011) (R290)
9612151.30005686	200-230V 50/60Hz (Raccord CN) (R290)

Refroidissement

Refroidissement machine frigorifique

1ère étape Air

Bain

Cuve de bain

Acier inoxydable

Électronique

Interfaces	Ethernet facultatif, RS232, USB
Régulation de la température	PID1
Affichage de la température	OLED
Réglage de la température	Écran tactile
Minuteur électronique h:min	99 ... 59

Dimensions et volumes

Poids kg	43.3
Diamètre intérieur de connexions pour tuyau mm	8/12 mm
Dimensions totales cm (L x P x H)	36.5 x 52.5 x 61
Dimensions du corps cm (L x P x H)	36.5 x 47.5 x 60
Volume de remplissage l	4 ... 7
Raccords de pompe	M16x1 mâle

Valeurs de température

Température de retour max. °C	+85
Plage de température de travail °C	-20 ... +85
Constance de température °C	±0.2
Température ambiante °C	+5 ... +40
Résolution d'affichage de la température °C	0.1

Autres

Classification	Classification I (NFL)
Conforme aux normes	CE, RoHs
Signal d'alarme s	Acoustic, Optical
Classification IP	IP 21
Fonction de pompe	Pompe à pression
Type de pompe	Pompe centrifuge
Langue de l'interface utilisateur	English, German
Niveau de sonore dB(A) ²	42 ... 52

² Le niveau de pression sonore peut augmenter lorsque la température d'environnement augmente.

Inclus dans la livraison

2 olives appropriées pour des tuyaux de 8 et 12 mm D.I.
(Connexion de pompe avec M16x1 filetage externe)