

CORIO CD-BC12 Thermostat à circulation

Thermostats de laboratoire de la nouvelle génération pour des travaux de routine et des tâches standards

Les thermostats de circulation CORIO™ offrent une technologie professionnelle pour de hautes attentes. Avec ces appareils une mise en température dans le bain interne et dans une application externe est possible.

Vos avantages

- Modèles pour les applications internes et externes
- Affichage lumineux blanc, bien visible de loin
- Très silencieux
- Changement simple entre circulation interne et externe
- Port USB
- Cuve inox de haute qualité avec couvercle et robinet de vidange
- Serpentin de refroidissement pour refroidissement



Données techniques

Référence	9012512
Type d'appareil	CORIO
Catégorie	Thermostats à circulation
Domaine de température (°C)	+20 ... +150
Constance de température (°C)	±0.03
Résolution de l'affichage	0.01
Affichage de température	LED
Puissance de chauffage (kW)	2
Débit de la pompe refoulante (l/min)	15
Pression de la pompe (bar)	0.35
Ouverture du bain/profondeur (l x L / P cm)	22 x 15 / 20
Connexion des pompes	M16x1
Olives pour tuyau Ø mm	8 / 12
Filling volume liters	8.5 ... 12
Température ambiante	5...40 °C
Dimensions l x L x H (cm)	33 x 49 x 47
Poids (kg)	12.2
Compris avec chaque appareil	2 Schlaucholiven passend für Schlauch 8 und 12 mm I.W. (Pumpenanschlüsse mit M10x1 Innengewinde)
Serpentin de refroidissement	Intégré
Cuve du bain	Inox
Couvercle du bain	Intégré
Disponibles avec les tensions d'alimentation suivantes	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz 100 V / 50-60 Hz

Eine Kühltülle für Arbeiten unterhalb bzw. nahe der Umgebungstemperatur ist integriert.

Caractéristiques



Testés à 100% .

Qualité à 100%. Chaque CORIO™ ne quitte l'usine qu'après avoir passé tous les tests de contrôle.



Travaille par tous les temps!.

Les appareils CORIO™ sont robustes et fiables – même avec des températures ambiantes allant jusqu'à +40°C.



ATC.

Absolute temperature calibration, calibration en 1 point. (CD)



Mise en service rapide.

Un conseil JULABO individuel et un mode d'emploi détaillé vous aident lors de la mise en service de votre appareil.



Brillant.

Affichage lumineux et intense, visible de loin.



Sécurité.

CORIO™ CD est conforme à la classe III (FL) selon DIN12876-1 et se coupe en cas de dépassement de température trop haute ou de niveau de bain trop bas.



Entretien: très facile.

Les appareils ne sont seulement beaux, mais ils sont conçus pour être nettoyés très facilement.



Pour votre satisfaction.

11 filiales et plus de 100 partenaires à travers le monde vous font bénéficier d'une aide JULABO rapide et compétente.



Connexion: très facile.

Des embouts de pompe en biais (M16 x 1) facilitent la connexion d'une application. Livré avec 2 noix de connexions pour des tuyaux avec des DI de 8/12 mm.



Nos services.

A votre entière disposition sur notre site internet : les fiches techniques des appareils, les modes d'emploi, les études de cas, la description des accessoires et bien plus encore.



Tout en façade!

Les commandes de pilotage et les sécurités sont toutes réglables en façade.




Silencieux.

Les têtes de thermostats CORIO™ sont montées sur tampons. Ceci protège l'électronique, réduit les bruits d'utilisation et les résonances.



Flexibilité.

Positionnez la sortie de pompe selon vos souhaits dans votre bain.

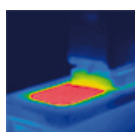

Economique.

Les pertes d'énergies sont limitées grâce à une isolation de qualité.



La technologie respectueuse de l'environnement.

Lors du développement n'ont été choisis que des matériaux et des techniques avec un faible impact sur la nature.



Stable et sûr sur ses pieds.

Montés sur patins en caoutchouc, les CORIO sont stables et ne dégradent pas vos installations.



Handle with ease.

Nous vous facilitons le travail de routine grâce aux poignées ergonomiques (avant et arrière).



Branché,... et c'est parti!

Pilotage intuitif, prêt à être utilisé avec très peu de manipulations.



En interne ou en externe.

Vous réglez la pompe directement sous le display, en passant simplement de circulation interne à externe.



Propre.

Un robinet de vidange spécial pour changer le liquide de bain, proprement et sans outil !



JULABO. Qualité.

La qualité maximale exigée pour le développement d'appareils de haute qualité et indestructibles.



Possibilité de manipulation.

Grâce à la poignée ergonomique, vous êtes protégé des brûlures.



Locked in.

The lockable power plug guarantees safe connection. More process safety.



Unique.

Les pyramides au design spécial vous assurent que les vapeurs condensées retombent dans le bain.



Moderne. Fiable.

Des composants de qualité dans chaque CORIO™. Des sondes platines, des technologies de motorisation éprouvées, une communication par CAN Bus et bien plus encore.



USB.

Les têtes de thermostats CORIO™ CD sont toutes équipées de série de prises USB.