

# KERN MPC · MPD Pèse-personnes


Pèse-personne professionnel à déclenchement au pied avec approbation d'homologation médicale pour l'utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



KERN MPD  
Pèse-personne Step-On



KERN MPC  
Pèse-personne

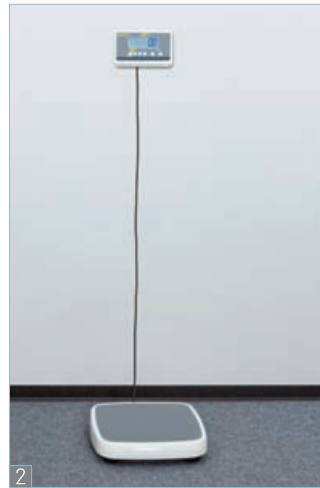

**Caractéristiques :**

- Classe d'homologation III (Homologation en option)
- Approbation médicale selon 93/42/CEE
- **1** Le best-seller dans les cabinets médicaux, les pharmacies et les hôpitaux : grand gain de temps dans l'utilisation, il suffit de le toucher, de monter dessus et de lire
- Modèle robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel
- Construction à l'ergonomie optimale
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur. En série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance.
- **3** Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale

**Autres caractéristiques de KERN MPC :**

- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Pesée sans secousse : filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
- Fonction Data Hold, en cas d'arrêt de service l'affichage du poids «fige» automatiquement pour 10 s jusqu'à la touche HOLD soit activée. Vous avez ainsi le temps de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
- Fonction mère-enfant : le poids de la mère déterminé par la pesée est réglé sur zéro d'une pression de bouton. Ensuite, la mère et

- l'enfant sont pesés ensemble. L'écran affiche alors directement le poids de l'enfant. Particulièrement agréable pour les bébés, qui peuvent être pesés en toute sécurité et sérénité dans les bras de leur mère
- Affichage haute précision: la lecture **[d]** peut être augmentée d'un cran pendant 5 sec sur une touche
- **2** Afficheur à position variable, p. ex. libre ou vissé au mur. Support mural en série pour montage mural de l'afficheur

**Caractéristiques techniques :**

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau LxPxH 365x360x80 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 200x128x55 mm
- Uniquement KERN MPC: Longueur de câble afficheur env. 200 cm
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Poids net env. 10 kg

**Accessoires :**

- Fonctionnement avec accu interne, durée de service jusqu'à 40 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, **KERN MBC-A03**

**3** La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

EN SÉRIE      OPTION      FACTORY

uniquement MPC **3**

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Échelon d'homologation [e] kg	Prescrit par la loi Homologation		Option Cert. d'étalonnage DKD	
				KERN		KERN	
KERN MPC 250K100M	250	0,1	0,1	965-129		963-129	
KERN MPD 250K100M	250	0,1	0,1	965-129		963-129	