


# Vases Dewar cylindriques



Type C



Type G-C

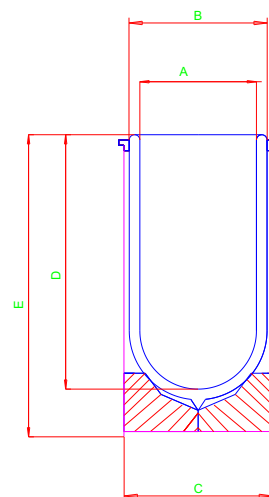

Caractéristiques techniques							LN2					
Type	Capacité max. env. [ ml ]	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Taux d'évaporation env. [ litres / jour ]	Type	N° d'art.	Type	N° d'art.	
00 C	100	40	56	63	90	135	0,3	00 C	1021			
0 C	200	40	56	63	170	215	0,2	0 C	1022	G 0 C	1061	
1 C	300	47	60	72	190	240	0,2	1 C	1023	G 1 C	1062	
2 C	450	47	60	72	270	310	0,25	2 C	1024	G 2 C	1063	
3 C	500	57	70	81	210	260	0,35	3 C	1025	G 3 C	1064	
4 C	750	57	70	81	310	370	0,3	4 C	1026	G 4 C	1065	
5 C	1250	57	70	81	500	550	0,25	5 C	1027			
6 C	800	67	80	90	240	295	0,35	6 C	1028	G 6 C	1066	
7 C	1200	67	80	90	350	395	0,3	7 C	1029	G 7 C	1067	
8 C	1700	67	80	90	500	560	0,3	8 C	10210			
9 C	1000	77	95	105	235	290	0,35	9 C	10211	G 9 C	1068	
10 C	1500	77	95	105	345	395	0,4	10 C	10212	G 10 C	1069	
11 C	2100	77	95	105	500	550	0,4	11 C	10213			
12 C	1500	90	115	124	245	300	0,5	12 C	10214	G 12 C	10610	
13 C	2000	90	115	124	340	390	0,5	13 C	10215	G 13 C	10611	
14 C	3200	90	115	124	600	665	0,45	14 C	10216			
15 C	1500	100	120	130	240	300	0,7	15 C	10217	G 15 C	10612	
16 C	2000	100	120	130	290	345	0,6	16 C	10218	G 16 C	10613	
17 C	4000	100	120	130	600	660	0,65	17 C	10219			
18 C	2500	110	130	140	290	345	0,7	18 C	10220	G 18 C	10614	
19 C	5000	110	130	140	600	660	0,6	19 C	10221			
20 C	3000	138	160	165	230	280	1,2	20 C	10222	G 20 C	10615	
S 21 C	4000	138	160	165	310	375	1,0	S 21 C	10223	GS 21 C	10616	
S 22 C	8000	138	160	165	600	660	0,9	S 22 C	10224	GS 22 C	10617	

## Propriétés

Vases Dewar en verre borosilicate 3.3 conforme à la norme DIN /ISO 3585 pour le stockage et le transport de LN<sub>2</sub>, de CO<sub>2</sub> et d'autres réfrigérants. Température de mise en œuvre -200 à +200 °C. Les vases Dewar sont isolés sous vide et argentés. Les vases sont dotés d'un manteau en aluminium laqué bleu. Les manteaux sont anti-magnétiques et anti-corrosifs.

## Exécutions standard

Type C = cylindrique enveloppé  
Type G-C = cylindrique enveloppé, avec poignée

## Exécution spéciale

Vases avec repères longitudinaux  
Vases raccourcis