


SOLUTIONS TECHNIQUES pour

laboratoires
& industries



LABO AND CO

Nos compétences et services associés

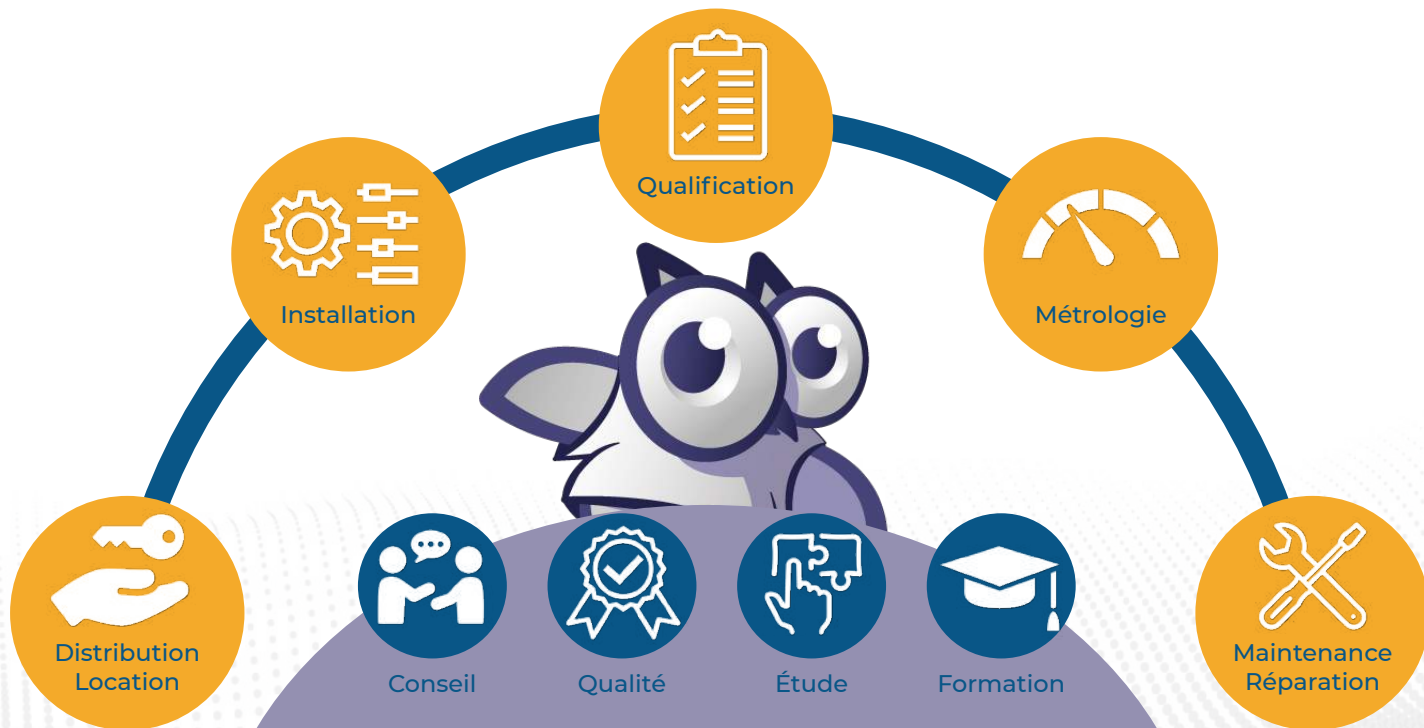

Une équipe de spécialistes

MAGIO MX-Z Thermostat sur pont

Les thermostats sur pont MAGIO fonctionnent avec une grande puissance de tempérage tout en offrant une flexibilité maximale. Grâce au pont réglable, les thermostats peuvent être utilisés avec n'importe quel cuve jusqu'à un volume de remplissage de 100 litres.

Écran tactile TFT haute résolution

L'écran tactile TFT moderne vous permet de voir toutes les informations importantes en un coup d'œil. Les trois grands écrans principaux prédéfinis affichent clairement les données et les graphiques avec les différents points forts des applications. La navigation dans le menu est intuitive, organisée en fonction de la pertinence dans le travail quotidien et facile à utiliser d'une simple pression du doigt. La fonction de support vous assiste à tout moment en répondant à vos questions détaillées.



Caractéristiques du produit

- Profondeur d'immersion de 200 mm (MX-Z) et 150 mm (MS-Z)
- Strong heating capacity of 3 kW (MX-Z) and 2 kW (MS-Z)
- pont en acier inoxydable extensible pour des largeurs de bain de 33 à 68 cm
- idéal pour les applications externes exigeantes
- contrôle aisé des applications complexes
- pompe de pression/d'aspiration extrêmement puissante et réglable en continu
- Débit 16 ... 31 l/min, pression de refoulement 0,24 ... 0,92 bar, pression d'aspiration 0,03 ... 0,4 bar
- pièces en acier inoxydable en contact avec le fluide
- Programmeur intégré
- Raccord Pt100 externe intégré
- Port USB
- Prise RS232 pour connexion on-line
- Interface Ethernet
- interfaces analogiques (accessoires)
- Profibus DP (Accessoire)
- Modbus
- Prise "Stakei" pour vanne électro magnétique de l'eau de refroidissement
- Prise RS232/RS485 pour connexion on-line
- Modèles pour applications internes et externes de 3 à 26 litres
- Robinet d'écoulement intégré pour une vidange rapide et sûre

Données techniques

Versions de tension disponibles		Refroidissement	
Référence	9 033 201	Serpentin de refroidissement	intégré
Versions de tension disponibles:			
9 033 201.33	200-230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
9 033 201.33.chn	200-230V/50-60Hz (CN Plug)		
Autres		Électronique	
Classification	Classification III (FL)	Raccord sonde Pt100 externe	intégré
Classification IP	IP 21	Programmeur intégré	8x60 étapes
Fonction de pompe	Pompe aspirante à pression	Régulation de la température	ICC
Type de pompe	Pompe à immersion	Absolute Temperature Calibration	Calibration en 3 points
		Affichage de la température	Écran tactile TFT 7"
		Réglage de la température	Écran tactile

		Minuteur électronique hr:min	00:00 ... 99:59
Dimensions et volumes		Valeurs de température	
Profondeur d'immersion utilisable cm	20	Réglage de la résolution de l'affichage de la température °C	0.01
Poids kg	7.6	Plage de température de travail °C	+20.0 ... +300.0
Dimensions cm (L x P x H)	34 x 19 x 41	Constance de température °C	+/-0.01
Raccords de pompe	M16x1 homme	Température ambiante °C	+10.0 ... +40.0
		Résolution d'affichage de la température °C	0.01

Performances

200-230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

200V/50Hz		200V/60Hz	
Puissance de chauffe kW	2.3	Puissance de chauffe kW	2.3
Viscosité max cST	70	Viscosité max cST	70
Débit de la pompe refoulante l/min	16 ... 31	Débit de la pompe refoulante l/min	16 ... 31
Puissance de la pompe pression bar	0.24 ... 0.92	Puissance de la pompe pression bar	0.24 ... 0.92
Puissance d'aspiration maximale bar	-0.03 ... -0.4	Puissance d'aspiration maximale bar	-0.03 ... -0.4
Puissance	13 A	Puissance	13 A
230V/50Hz		230V/60Hz	
Puissance de chauffe kW	3	Puissance de chauffe kW	3
Viscosité max cST	70	Viscosité max cST	70
Débit de la pompe refoulante l/min	16 ... 31	Débit de la pompe refoulante l/min	16 ... 31
Puissance de la pompe pression bar	0.24 ... 0.92	Puissance de la pompe pression bar	0.24 ... 0.92
Puissance d'aspiration maximale bar	-0.03 ... -0.4	Puissance d'aspiration maximale bar	-0.03 ... -0.4
Puissance	16 A	Puissance	16 A

200-230V/50-60Hz (CN Plug)

200V/50Hz		200V/60Hz	
Puissance de chauffe kW	2.3	Puissance de chauffe kW	2.3
Viscosité max cST	70	Viscosité max cST	70
Débit de la pompe refoulante l/min	16 ... 31	Débit de la pompe refoulante l/min	16 ... 31
Puissance de la pompe pression bar	0.24 ... 0.92	Puissance de la pompe pression bar	0.24 ... 0.92
Puissance d'aspiration maximale bar	-0.03 ... -0.4	Puissance d'aspiration maximale bar	-0.03 ... -0.4
Puissance	13 A	Puissance	13 A
230V/50Hz		230V/60Hz	
Puissance de chauffe kW	3	Puissance de chauffe kW	3
Viscosité max cST	70	Viscosité max cST	70
Débit de la pompe refoulante l/min	16 ... 31	Débit de la pompe refoulante l/min	16 ... 31
Puissance de la pompe pression bar	0.24 ... 0.92	Puissance de la pompe pression bar	0.24 ... 0.92
Puissance d'aspiration maximale bar	-0.03 ... -0.4	Puissance d'aspiration maximale bar	-0.03 ... -0.4
Puissance	16 A	Puissance	16 A

Avantages



Testés à 100% .
Qualité à 100%. Chaque thermostat JULABO ne quitte l'usine qu'après avoir passé tous les tests de contrôle.



La technologie respectueuse de l'environnement.
Lors du développement n'ont été choisis que des matériaux et des techniques avec un faible impact sur la nature.



JULABO. Qualité.
La qualité maximale exigée pour le développement d'appareils de haute qualité et indestructibles.



Mise en service rapide.
Un conseil JULABO individuel et un mode d'emploi détaillé vous aident lors de la mise en service de votre appareil.



Pour votre satisfaction.
11 filiales et plus de 100 partenaires à travers le monde vous font bénéficier d'une aide JULABO rapide et compétente.



Nos services.
A votre entière disposition sur notre site internet : les fiches techniques des appareils, les modes d'emploi, les études de cas, la description des accessoires et bien plus encore.



Le top de la précision de la mesure
'Absolute Temperature Calibration' pour compenser une différence de température, calibration en 10 points



Écran tactile. Commande parfaite.
Avec l'écran tactile, l'utilisateur a toujours accès à toutes les valeurs et fonctions. La structure du menu intuitive et multilingue permet une commande parfaite.



Thermorégulation intelligente.
Intelligent Cascade Control – adaptation automatique et à optimisation automatique des paramètres de régulation PID avec une constante externe de +/- 0,05 °C.



De nombreuses interfaces.
Télécommande facile, gestion des données et intégration des structures de processus. USB, Ethernet, RS232, carte SD et sortie alarme sont intégrés. D'autres interfaces sont disponibles en accessoire.



Sécurité maximale.
La classification III conforme à la norme DIN12876-1 permet un fonctionnement sûr, même avec des fluides inflammables. Coupure automatique en cas de température haute ou de niveau trop bas.



Economie de place.
Placez votre thermostat JULABO directement à côté d'un autre instrument, de murs ou autres applications. Economisez de la place : notre appareil n'a pas d'ouvertures de ventilation ou de connexions latérales.



Plurilingue.
Commande en plusieurs langues.



Programmeur. Intégré.
Le programmeur interne permet le passage automatique de profils temporels des températures.



Température. Sous contrôle.
Prise pour connexion de sonde Pt100 externe pour une mesure et une régulation de haute précision directement dans une application externe connectée.



Niveau de remplissage. Surveillé.
Affichage du niveau de remplissage du médium thermorégulateur sur l'écran.



Sécurité du processus.
La rapidité de l'affichage optique et acoustique de situations critiques augmente la sécurité du processus.



Processus. Sous contrôle.
Contrôle total de la dynamique de régulation, accès aux paramètres de régulation importants pour une optimisation individuelle du processus.



Stable. Mobil.

Les pieds en caoutchouc permettent le bon maintien de JULABO circulators. Plus grand et plus puissant, les éléments sont également composés de roues facilitant sa manipulation.



Économe en énergie.

L'isolation hautement qualitative de tous les composants importants permet des économies d'énergie.



Tout en acier inoxydable.

Haut niveau de qualité et de compatibilité avec les matériaux. Toutes les pièces en contact avec le produit sont entièrement en acier inoxydable.



Polyvalent.

Cryothermostat et thermostats chauffants dans diverses combinaisons, thermostat à circulation dans différentes tailles. Flexibilité maximale à l'aide d'un grand nombre d'accessoires.



Connexion: très facile.

Des embouts de pompe en biais (M16 x 1) facilitent la connexion d'une application. Livré avec 2 noix de connexions pour des tuyaux avec des DI de 8/12 mm.



Analogue I/O.

Interfaces analogues pour l'intégration du système de commande. (Accessoire)



Pompe puissante.

Avec des performances situées entre 0,9 et -0,4 bars, la pompe de pression/aspirante intégrée est la plus puissante de sa classe. Elle se règle en outre en continu.



Protection contre la condensation.

La ventilation intégrée fait passer le courant d'air au dessus du couvercle et limite la condensation.

LABO AND CO

50 avenue de Grosbois
94440 Marolles-en-Brie

Tel : 01 45 98 74 80

Fax : 01 45 98 77 23

contact@laboandco.com



LABO AND CO



Gardez un œil sur laboandco.com

laboandco.com