

Dcare® amalia

LAMPE DE LECTURE ET DE SOINS

•••••
LED



QUALITE ET DESIGN PARFAITS

Communication

L'avantage client est notre priorité. Nous pensons et agissons en conformité avec nos clients. Un solide savoir-faire et des services complets sont nos points forts.

La nouvelle D^{care}® **amalia** étonne par son intensité lumineuse puissante et son design parfait. Cette lampe unique offre des conditions d'éclairage optimales pour la lecture, mais aussi le meilleur éclairage lors des soins.

Marchés et distribution

La D^{care}® **amalia** à l'assaut des marchés. Son lancement débutera en Europe. Prochaines étapes : son introduction est prévue sur les marchés américains et asiatiques.

Les ventes ont lieu via les réseaux de distribution habituels. Dans certains pays, l'obtention des certificats requis prendra plus de temps, il y aura donc des limitations temporaires sur ces marchés là.

Cibles

Nos clients finaux sont les «seniors» et les patients. Les décideurs sont les directeurs de maisons de retraite et de cliniques, ainsi que les personnels soignants. Le potentiel des ventes se trouve dans les domaines suivants :

- les établissements de soins
- les maisons de retraite
- les maisons de retraite médicalisées
- les hôpitaux et les cliniques
- les fabricants de lits

Leaders d'opinion

Potentiel de leaders d'opinion ayant une influence stratégique à long terme sur le comportement d'achats :

- les leaders d'opinion
- les directeurs nationaux
- les organismes
- les architectes, les BE, les agences

INFORMATIONS PRODUIT

LA NOUVELLE D^{care}® **amalia** 9 P S4

La lampe de soins et de lecture s'adapte complètement aux besoins variables des maisons de retraite ou de soins, et des hôpitaux ou cliniques.

Chez les personnes malades, la charge des soins est immense. En général, chez les personnes âgées viennent s'ajouter des difficultés visuelles et de perception liées à l'âge. Un bon éclairage est une condition préalable au bon environnement de travail pour le personnel soignant et synonyme de plus d'indépendance pour les «seniors».

Combiné à un concept professionnel, l'éclairage influence l'atmosphère générale de la pièce. Les dimensions, les teintes et les matériaux développent leur effet individuel. Un bon éclairage augmente la qualité de vie, la vitalité physique et mentale, et réduit donc considérablement la charge des soins.

Bras flexible avec gainage plastique

Articulation à friction

Pince (de table)

Capteur ON/ OFF pour l'éclairage
d'orientation / Veilleuse ambrée

Axe sans fin 360°
Rotation complète

Lampe de lecture et de soins
puissante équipée de 3 x LED
blanc chaud (3000 Kelvin)

Poignée équipée d'un capteur lumineux
ON/ OFF pour l'éclairage de lecture

Réflecteur disponible
en différentes variantes



INFORMATIONS PRODUIT


TROIS VERSIONS DE LAMPE ET VARIANTES DE DESIGN DU REFLECTEUR



D'care® **amalia 9 P S4**
D15.250.000

Version sur bras articulé et flexible¹


- pour fixation sur rail
- pour fixation murale
- pour fixation sur pince de table
- réflecteur disponible en différentes variantes

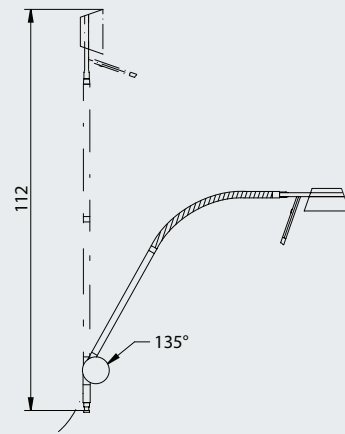

D'care® **amalia 9 P S7**
D15.251.000

Version avec 2 bras flexibles¹


- pour fixation sur rail
- pour fixation murale
- pour fixation sur pince de table
- pour fixation universelle
- réflecteur disponible en différentes variantes

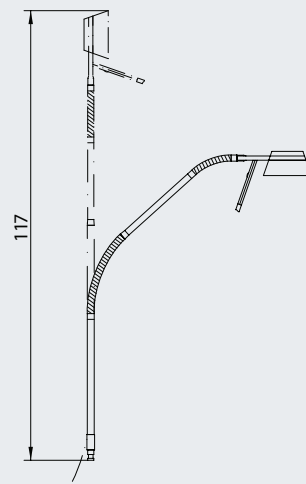

D'care® **amalia 9 B S8**
D15.252.000

Version avec fixation pour lit intégrée¹

- avec adaptateur pour lit intégré
- réflecteur disponible en différentes variantes

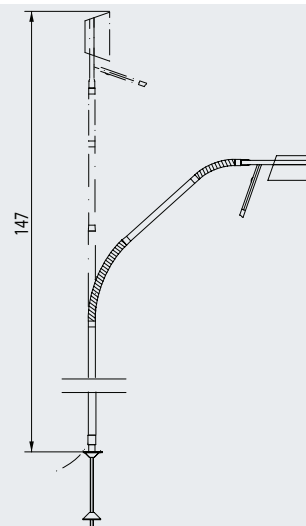

¹ aucune variante avec interrupteur sur cordon n'est prévue.



D53.718.000

- en rotin
- cousu
- lavable



D53.719.000

- film technique
- collé
- lavable

CONFORT D'ÉCLAIRAGE. PLUS, TOUT SIMPLEMENT.

INTENSITE LUMINEUSE - L'incroyable intensité lumineuse est obtenue grâce à 3 LED qui offrent un rendement lumineux de 1000 lx / 0,5 m.

POSITIONNEMENT - Grâce à son bras flexible très souple, la D^{care}® **amalia** offre une grande amplitude de mouvement et se positionne aisément.

CONFORT D'UTILISATION - La poignée robuste contribue à une parfaite maniabilité. Le capteur ON/ OFF situé derrière la poignée simplifie la commutation de la lampe de lecture. La veilleuse à LED de teinte ambrée est commutable via un interrupteur sensoriel dédié.

SYSTEME SANS FIN - La rotation libre permet de tourner la tête de la lampe à 360° en continu.

QUALITE D'ÉCLAIRAGE - Une répartition homogène de la lumière et la liberté de mouvement de la tête de la lampe garantissent un éclairage non éblouissant. Aucune ombre irritante, ni de sévère réflexion.

QUALITE ET SECURITE.

DESIGN - La D^{care}® **amalia** combine un éclairage de qualité élevée et un design tendance. Ceci est conforme aux exigences des clients actuels.


LONGUE DUREE DE VIE - La construction robuste confère aux utilisateurs une utilisation solide et durable.

CERTIFICATION - En Europe, la lampe est affectée aux produits médicaux de classe 1. Elle répond ainsi aux exigences pour les appareils médicaux électriques dans les établissements de soins ou médicaux, et dans les hôpitaux.

SECURITE - Grâce à la nouvelle technologie LED et à sa construction parfaite, il n'y a aucun dégagement de chaleur vers l'avant. Tout risque de blessure ou d'incendie est écarté pour l'utilisateur.

SERVICE - L'entretien est effectué par Waldmann et Derungs. De nouvelles variantes du réflecteur peuvent être aisément remplacées et installées chez le client.

ENTRETIEN - La construction close et des surfaces lisses garantissent un nettoyage rapide et clinique, empêchant la pénétration de poussière, de liquide ou de saleté. Des produits de nettoyage spécifiques sont recommandés.

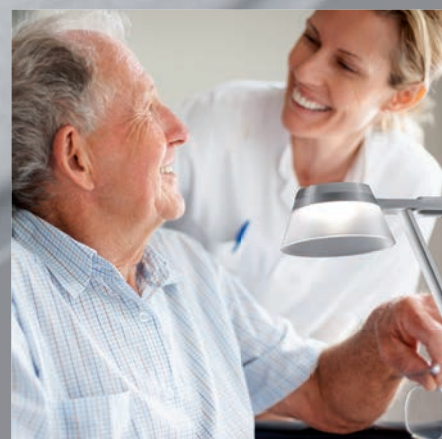

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR. CONFIANCE TOTALE.

ECLAIRAGE DE SOINS - La prise en charge des personnes malades est un travail très exigeant. La D^{care}® **amalia** offre un large champ éclairé pour les soins, l'analyse de la peau, le changement de bandages, les piqûres ou la mise en place de perfusions.

LAMPE DE LECTURE - La lampe offre une luminosité élevée pour lire sans être ébloui.

VEILLEUSE - La LED de teinte ambrée permet de s'orienter et de détecter les contours dans l'obscurité. Réduction des chutes et diminution des angoisses.

AMBIANCE - Un bon éclairage encourage et rend l'ambiance sympathique. La D^{care}® **amalia** procure confort et sécurité. La qualité de vie est améliorée.

IMAGE - L'impression et l'effet de l'éclairage procurent un sentiment de confort et de sécurité, qui influencent la perception des visiteurs et véhiculent une image positive de l'établissement.

EFFICIENCE. GAIN DE TEMPS.

DUREE DE VIE - La nouvelle technologie LED est très conviviale en terme de maintenance. Grâce à la longue durée de vie des LED (30 000 heures), le changement des sources n'est pas nécessaire.

EFFICIENCE ENERGETIQUE - La puissance lumineuse optimale est obtenue avec une faible consommation électrique (9 Watt). Par respect pour notre environnement.

PROCESSUS DE SOINS - La charge de travail, lors des soins, est allégée. L'efficacité, la qualité et la productivité ainsi que la motivation et le bien-être augmentent.

QUALITE - Des matériaux de très bonne qualité, des sources lumineuses efficaces diminuent les coûts de maintenance et augmentent la rentabilité.

efficient *light*



GAMME DE PRODUITS / DONNEES TECHNIQUES

D^{care®} **amalia 9 P S4**




DONNEES TECHNIQUES

EQUIPEMENT	1 module LED
INTENSITE LUMINEUSE	1000 Lux / 0.5 m
CHAMP ECLAIRE 0.5 M	45 cm
TEMPERATURE DE COULEUR	3000 K
APPAREILLAGE	transfo. électronique intégré dans la fiche
TENSION D'ALIMENTATION	100-240 V ; 50/60 Hz
CABLE D'ALIMENTATION	2 m
CORPS DU LUMINAIRE	plastique et aluminium
POIDS (NET)	1.5 kg
PUISSANCE ABSORBEE	9 W
COMMANDE	bouton poussoir
COMPENSATION D'ARTICULATION	par friction
CLASSE DE PROTECTION	I
ACCESSOIRE	D53.718.000 (rotin) ; D53.719.000 (film)
NORMES	EN 60601-1; EN 60601-2-41
PARTICULARITE	veilleuse (LED)
FIXATION	rail ; table ; mur ; embout (16mm W)
N° D'ARTICLE	D15.250.000 - argenté



REPARTITION LUMINEUSE

DESSIN TECHNIQUE

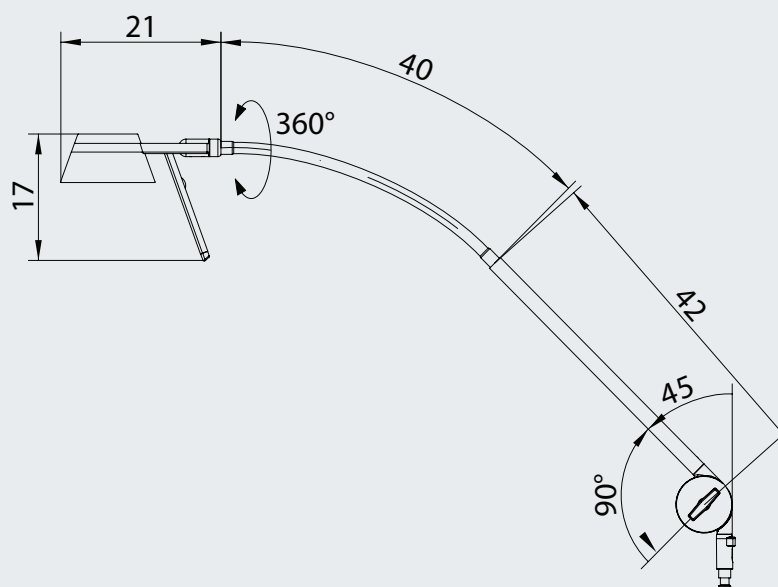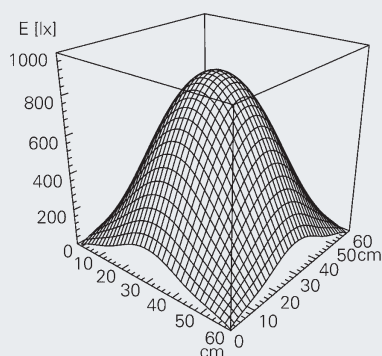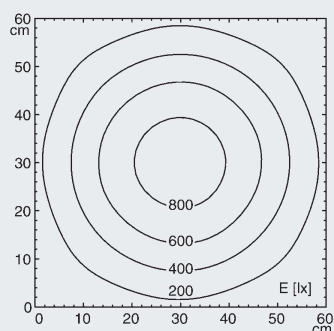

GAMME DE PRODUITS / DONNEES TECHNIQUES

D^{care®} **amalia 9 P S7**




DONNEES TECHNIQUES

EQUIPEMENT	1 module LED
INTENSITE LUMINEUSE	1000 Lux / 0.5 m
CHAMP ECLAIRE 0.5 M	45 cm
TEMPERATURE DE COULEUR	3000 K
APPAREILLAGE	transfo. électronique intégré dans la fiche
TENSION D'ALIMENTATION	100-240 V ; 50/60 Hz
CABLE D'ALIMENTATION	2 m
CORPS DU LUMINAIRE	plastique et aluminium
POIDS (NET)	1.5 kg
PUISSANCE ABSORBEE	9 W
COMMANDE	interrupteur
COMPENSATION D'ARTICULATION	par friction
CLASSE DE PROTECTION	I
ACCESSOIRE	D53.718.000 (rotin); D53.719.000 (film)
NORMES	EN 60601-1; EN 60601-2-41
PARTICULARITE	veilleuse (LED)
FIXATION	rail ; table ; mur ; embout (16mm W)
N° D'ARTICLE	D15.251.000 - argenté



REPARTITION LUMINEUSE

DESSIN TECHNIQUE

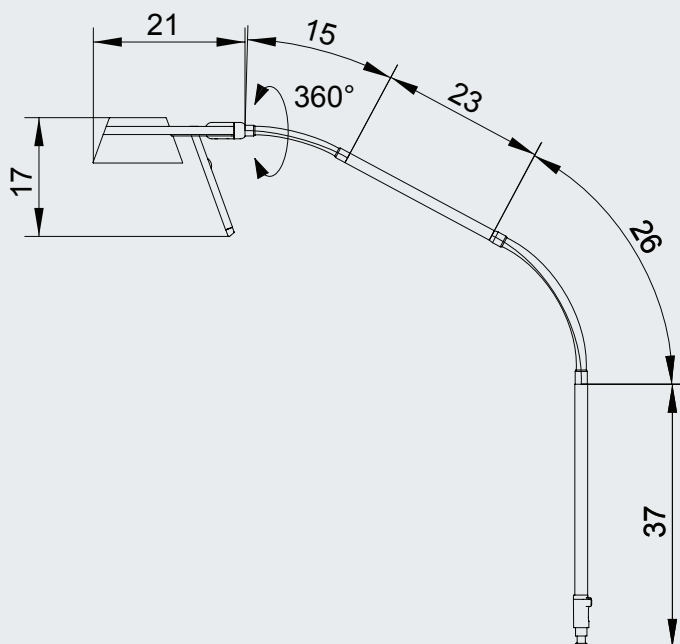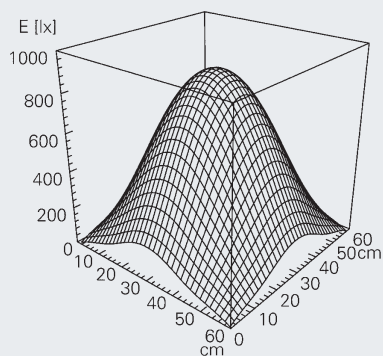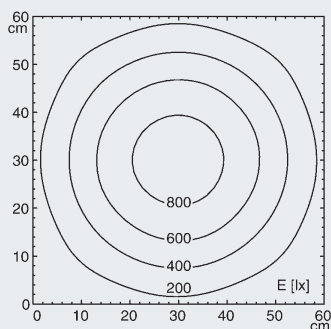

GAMME DE PRODUITS / DONNEES TECHNIQUES

D^{care}® **amalia 9 B S8**

DONNEES TECHNIQUES

EQUIPEMENT	1 module LED
INTENSITE LUMINEUSE	1000 Lux / 0.5 m
CHAMP ECLAIRE 0.5 M	45 cm
TEMPERATURE DE COULEUR	3000 K
APPAREILLAGE	transfo. électronique intégré dans la fiche
TENSION D'ALIMENTATION	100-240 V ; 50/60 Hz
CABLE D'ALIMENTATION	2 m
CORPS DU LUMINAIRE	plastique et aluminium
POIDS (NET)	1.5 kg
PUISSANCE ABSORBEE	9 W
COMMANDE	bouton poussoir
COMPENSATION D'ARTICULATION	par friction
CLASSE DE PROTECTION	I
ACCESSOIRE	D53.718.000 (rotin); D53.719.000 (film)
NORMES	EN 60601-1; EN 60601-2-41
PARTICULARITE	veilleuse (LED)
FIXATION	adaptateur universel pour lit
N° D'ARTICLE	D15.252.000 - argenté



REPARTITION LUMINEUSE

DESSIN TECHNIQUE

